



medemagruppen



medemagruppen
Hippocampe



medemagruppen

Hippocampe

- Ett hav av möjligheter

Hippocampe är ett fritidshjälpmedel som flyttar gränser och möjliggör att man kan utforska och uppleva saker även om man inte kan ta sig fram på egen hand.

Hippocampe tål både saltvatten och klor. De breda hjulen gör att det går fint och stabilt att ta sig fram på sand och andra porösa underlag. Med denna bad- och strandstol kan man njuta av en dag på stranden med ett uppfriskande dopp eller besöka badhuset.

Vintertid kan man utrusta Hippocampe med skidor som ett tillbehör. Att kunna njuta av naturen och en fika med varm choklad i skidspåret kan bli ett fint minne för livet och möjligt för så många fler med en Hippocampe.

Vagnen är byggd av mycket lätta material, fälls enkelt ihop, och kan levereras med en praktisk transportbag som tillbehör.



HIPPOCAMPE®





medemagruppen



Strand

Hippocampe är designad för att användas i sand och har därför inga kullager. Ballonghjulen som finns som tillbehör gör det ännu enklare att ta sig fram i lös och torr sand.



Bad

Hippocampe tål både saltvatten och klor. Med följeslagare kan du som använder Hippocampe ta dig av och på den i vattnet. Detta gör det möjligt att njuta av bad även där det inte finns tillgång till andra hjälpmedel.



Vattenaktivitet

Hippocampe gör det enklare att tillgå annan utrustning vid vattenaktiviteter: anpassad kajakpaddling, handisurfing, dykning, segling och simning.



Promenad

Med Hippocampe och dess olika tillbehör blir det möjligt att njuta av en härlig promenad längs stranden, en skogsväg eller ute på landet.



Vandring

Hippocampe ger dig möjligheten att upptäcka och utforska platser som är svåra att besöka med en vanlig rullstol.



Snö

Njut av vintern och snön genom att utrusta Hippocampe med skidor.



medemagruppen

Tillbehör Hippocampe

Hippocampe finns i två färger: blå som är std eller rosa, och i fyra storlekar: S, M, L och XL.

Rullstolen erbjuds med många tillbehör som gör att du kan konfigurera den efter dina behov.

En del tillbehör ingår i vårt svenska standardutförande.



Support och säkerhet



Armstöd, par (std)

Armstöden, täckta med skum, kan vridas och dras in för att underlätta förflyttningar i Hippocampe-rullstolen.



Justerbart nackstöd

Nackstödet är täckt med bekvämt skum och anpassar sig efter användarens position. Det är justerbart framåt, bakåt och i höjdlid.



Väst

Tillverkad av bekväm och vattenavvisande elastisk neopren, 4-punktssele underlättar användarens stöd och positionering.



Höftbälte (std)

Det breda och bekväma midjebältet håller användaren i en säker position längst ner på sätet. Ett komfortskum skyddar användaren från kontakt med spännat.



20" Ekerskydd

20" hjulskydden skyddar användarens hand från kontakt med hjulen.



Parkeringsbroms (std)

Svängbara och rostfria parkeringsbromsar gör att rullstolen kan fixeras i små sluttningar eller för att underlätta förflyttning.



Sittinsats Stabilo

Stabilo neoprenpositioneringsdynan kan formas med vakuum och ger extra stöd till användaren genom att perfekt anpassa sig till kroppens form och behov. Den är vattentät.




Höjdjusterbart och fällbart ryggstöd (std)

Den höjdjusterbara och fällbara ryggstödsramen gör det enkelt att variera ryggstödet totala höjd efter användarens behov.



Nät armstöd

Armstödsnäten passar mellan sits och armstöd, för att skydda användarens händer från hjulekrana.

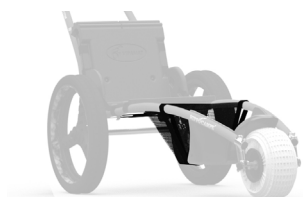

Nät fotstöd

Fotstödsnätet passar mellan sitsen och fotstödet, för att skydda användarens fötter.





medemagruppen

Fritid



Ballonghjul, par

Ballonghjulen underlättar att ta sig fram i mjuk fin sand.



Skidkit, framhjul

Skidan monteras till-sammans med Hippocampes främre hjul.



Skidkit, bakhjul

De bakre drivhjulen kopplas enkelt bort och ersätts av detta skidkit.



Styre

Styret optimerar påskjutarens handpositionering och underlättar terrängvandringar.

Förvaring



Transportbag

Transportbagen underlättar och skyddar Hippocampe under transport i till exempel bil eller flyg.



Ryggstödsväska

Ryggstödsväskan monteras på baksidan av sätet och gör det enkelt att förvara och hålla koll på sina personliga tillhörigheter under olika aktiviteter.





medemagruppen



HIPPOCAMPE®

Färgval



Marmorerad blå (std)



Marmorerad rosa
(beställningsvara)

Storleksguide



Stl S: upp till 140 cm

Stl M: från 140-165 cm

Stl L: från 165-185 cm

Stl XL: från 185 cm

CE, FDA AND ISO 13485

VIPAMAT säkerställer en nivå av kvalitet och prestanda som uppfyller certifieringskraven CE, från FDA och ISO 13485.

Teknisk data

Sits: bekvämt vattenavvisande skum (3 cm tjockt) täckt med ett svart tyg som torkar snabbt och förebygger hudproblem. Tyg och skum som uppfyller brandbeständighetsstandarden NFEN1021-2.

Ram: rostfritt stål och anodiserad aluminium täckt med en skumbeklädnad, vilket gör att ramens temperatur inte påverkas nämnvärt av värme eller kyla.

Körbåge: anodiserat aluminiumrör med ett handtag täckt med skum vilket gör Hippocampes körbåge bekväm att hålla i oavsett yttre temperatur.

Hjul: 20" dubbla hjul i rostfritt stål och lågtrycksballonghjul finns som tillval.

Mått



Sittlängd - fot

S: 72 cm M: 82 cm
L: 92 cm XL: 105 cm



Total längd

S: 170 cm M: 180 cm
L: 190 cm - XL: 203 cm



Ryggstöd höjd

37 cm till 47cm



Total höjd

103 cm



Sittdjup

37 cm



Sitthöjd - från marken

20 tums hjul: 34 cm

Ballong hjul: 34 cm



Vikt

Vikt utan tillbehör: 17 kg

Max brukarvikt: 130 kg



Total längd ihopfälld

S: 116 cm M: 126 cm

L: 136 cm XL: 149 cm



Sittbredd


40 cm



Invändig bredd

(utan armstöd)

50 cm

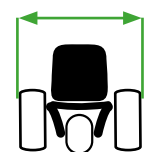

Total bredd med

ballonghjul

100 cm



Total bredd

dubbla hjul

68 cm





Ver: 2024-04-09



medemagruppen