



medemagruppen

Positioneringshjälpmedel



medemagruppen




STEALTH POSITIONING



Välkommen till ett nytt Skandinaviskt sortiment av positioneringshjälpmedel!

Medema-gruppen har tillsammans med Stealth glädjen att få presentera en serie positioneringshjälpmedel där det har lagts stor vikt på detaljer och val av material, allt för att användaren ska få rätt stöd och position i sittande och därmed ges förutsättningar för en aktiv och självständig vardag.

Stealth har genom åren positionerat sig som en av världens ledande producenter av positioneringshjälpmedel. I denna broschyr vill vi presentera dig för våra "mjuka" produkter, så som höftbälten, fixeringsvästar, bröstselar och ankelfixering.

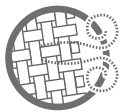

Material som andas

Ett unikt material med öppen cellstruktur gör att luft kan cirkulera och fukt släppas ut. Detta minskar uppbyggnaden av värme och användaren får en svalare, torrare och bekvämare upplevelse.



Dynamiskt stöd

Ett dynamiskt stöd ger förutsättningar för god postural kontroll. Användaren ges utrymme att röra sig inom ett begränsat område och uppmuntras på så sätt att återgå till sin neutrala position. Ett följsamt stöd upplevs också skönare mot kroppen.



Roterbara spännen

Detta spänne sitter på bältets nedre remar. Det roterar och ger därmed möjlighet till "själjustering". Spänningar kan kontinuerligt utjämnas och användaren kan sitta mer avslappnat och komfortabelt.



Långa fixeringsremmar

Ger förutsättning för korrekt placering av de övre fästena och säkerställer därmed att justering av den posturala kontrollen bibehålls.



Tips för att lyckas med positionering:

1. Använd så lite fixering som möjligt, men se till att den är på rätt plats.
2. Dra åt höftbältet så att det sitter stramt och maximalt 45 grader ovanför höftkammen.
3. Om användaren glider ur stolen, överväg 4-punktsbälte med stöd långt under 45 grader.
4. Vid roterat bäcken använd ett bälte med 2 drag.
5. Undvik att användaren arbetar emot fixeringen över en längre tid, målet är att lindra och stödja, inte öka spasticitet och muskelspänning.
6. Använd rätt typ av fixering på överkroppen, se till att överkroppsfixeringen inte klämmer mot mjukdelar eller kommer i vägen för luftvägarna.
7. Håll god hygien på ditt hjälpmedel så att materialets egenskaper bibehålls.


- Material som andas
- Dynamiskt och strukturerat stöd
- Roterbara spännen
- Brett utbud av storlekar
- Ergonomiskt genomtänkt



Höftbälten


- Hjälper till att upprätthålla bäckenet i en neutral position, vilket har en direkt påverkan på kroppens hållning och fördelar trycket på bästa sätt.
- Ökar stabiliteten vid sittande, minskar den ansträngning som krävs för att sitta upprätt och underlättar rörelser i de övre extremiteterna.
- Bidrar till korrekt huvudpositionering.
- Minskar en felaktig hållning av kroppen som kan leda till asymmetri, felställningar eller andra sekundära medicinska komplikationer.

Polster 2-punkt höftbälte

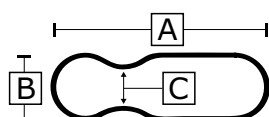

	A	B	C
XS	11cm	4 cm	3 cm
S	14 cm	4 cm	3 cm
M	19 cm	6 cm	4 cm
L	24 cm	7 cm	6 cm
XL	29 cm	7 cm	6 cm


Höftbälte 2-punkt

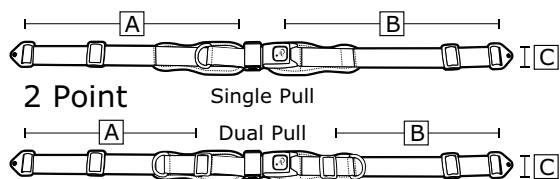

	A	B	C	Polster höftbälte
1-drag	81cm	69 cm	3 cm	NP / XS
1-drag	81cm	69 cm	3 cm	NP
2-drag	61cm	61cm	3 cm	XS / S
1-drag	81cm	69 cm	4 cm	NP / M / L
2-drag	61cm	61cm	4 cm	M / L
1-drag	81cm	69 cm	5 cm	NP / L / XL
1-drag	81cm	69 cm	5 cm	L / XL
2-drag	61cm	61cm	5 cm	L / XL

Art.nr	Artikelbenämning
2012-1366	Höftbälte Stealth stl XS 2-pkt m tryckknapp enkelt drag
2012-1367	Höftbälte Stealth stl S 2-pkt m tryckknapp enkelt drag
2012-1409	Höftbälte Stealth stl M 2-pkt m tryckknapp enkelt drag
2012-1410	Höftbälte Stealth stl L 2-pkt m tryckknapp enkelt drag
2012-1411	Höftbälte Stealth stl XL 2-pkt m tryckknapp enkelt drag
2012-1327	Höftbälte Stealth stl M 2-pkt m fixspänne enkelt drag
2012-1331	Höftbälte Stealth stl L 2-pkt m fixspänne enkelt drag
2012-1332	Höftbälte Stealth stl XL 2-pkt m fixspänne enkelt drag
2012-1412	Höftbälte Stealth stl XS 2-pkt m tryckknapp dubbelt drag
2012-1322	Höftbälte Stealth stl S 2-pkt m tryckknapp dubbelt drag
2012-1329	Höftbälte Stealth stl M 2-pkt m tryckknapp dubbelt drag
2012-1333	Höftbälte Stealth stl L 2-pkt m tryckknapp dubbelt drag
2012-1334	Höftbälte Stealth stl XL 2-pkt m tryckknapp dubbelt drag

Höftbälte 4-punkt

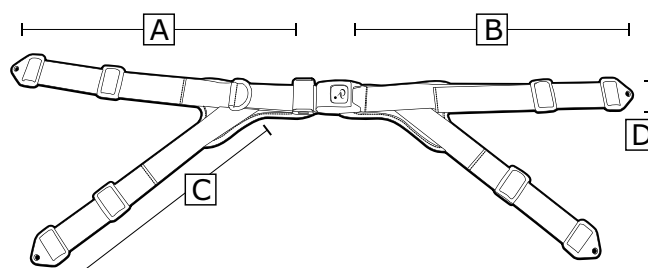

A	B	C	D	Spände	Str
81 cm	69 cm	51cm	3 cm	Tryckknapp	XS
81 cm	69 cm	51cm	4 cm	Tryckknapp	S / M / L

Art.nr	Artikelbenämning
2012-1391	Höftbälte Stealth stl XS 4-pkt m tryckknapp enkelt drag
2012-1392	Höftbälte Stealth stl S 4-pkt m tryckknapp enkelt drag
2412-1026	Höftbälte Stealth stl M 4-pkt m tryckknapp enkelt drag
2012-1325	Höftbälte Stealth stl L 4-pkt m tryckknapp enkelt drag

Viktiga tillbehör



Säkerhetsskydd



Cam lock



Klämfäste



Monteringsset MC


Art.nr	Artikelbenämning
2012-1434	Säkerhetsskydd Stealth t höftbälte m tryckknapp stl XS/ S
2012-1435	Säkerhetsskydd Stealth t höftbälte m tryckknapp stl M/L
2012-1436	Fäste höftbälte Stealth cam lock t XS/S
2012-1437	Fäste höftbälte Stealth cam lock t M/L
2012-1438	Fäste höftbälte Stealth cam lock t L/ XL
2012-1439	Klämfäste Stealth omkrets 22-25mm fixering av höftbälte par
2012-1440	Förhöjningsbeslag Stealth t fixeringsväst h 9 cm b 5 cm
2012-1460	Monteringsset Stealth t MC EI höftbälte 2-pkt
2012-1461	Monteringsset Stealth t MC EI höftbälte 4-pkt
2012-1462	Monteringsset Stealth t MC EI bröstsele
2012-1463	Monteringsset Stealth t MC EI väst
2012-1464	Monteringsset Stealth t MC EI ankelfixering



Förhöjningsbeslag

Fixeringsväst Classic Dynamic


Classic Dynamic har en stor stödyta och passar de flesta. Dynamiska egenskaper för god flexibilitet, stabilitet och komfort.

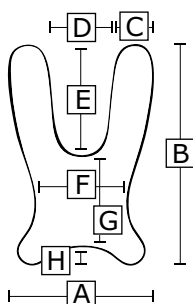

	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19 cm	32 cm	5 cm	9 cm	19 cm	9 cm	8 cm	5 cm
S	22 cm	39 cm	5 cm	11 cm	23 cm	10 cm	10 cm	5 cm
M	24 cm	48 cm	5 cm	14 cm	28 cm	13 cm	13 cm	7 cm
L	27 cm	57 cm	5 cm	17 cm	33 cm	15 cm	15 cm	9 cm
XL	29 cm	65 cm	6 cm	17 cm	36 cm	18 cm	18 cm	11 cm

Fixeringsväst Classic Dynamic Slank

Classic Dynamic Slank har en mindre stödyta och ger mindre tryck över bröstet. Passar ofta smalare personer, samt kvinnor tack vare utformningen över bysten. Dynamiska egenskaper för god flexibilitet, stabilitet och komfort.

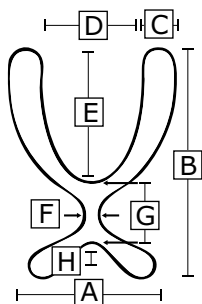

	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19 cm	32 cm	5 cm	9 cm	19 cm	3 cm	9 cm	3 cm
S	22 cm	39 cm	5 cm	11 cm	23 cm	3 cm	11 cm	4 cm
M	24 cm	48 cm	5 cm	14 cm	28 cm	3 cm	13 cm	6 cm
L	27 cm	57 cm	5 cm	17 cm	33 cm	3 cm	15 cm	9 cm
XL	29 cm	65 cm	6 cm	17 cm	36 cm	4 cm	18 cm	11 cm



Classic Dynamic



Classic Dynamic Slank



Classic Dynamic dragkedja


Art.nr	Artikelbenämning
2012-1393	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic stl XS
2012-1364	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic stl S
2012-1337	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic stl M
2012-1339	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic stl L
2012-1441	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic stl XL
2012-1442	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic slank stl XS
2012-1443	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic slank stl S
2012-1444	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic slank stl M
2012-1445	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic slank stl L
2012-1446	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic slank stl XL
2012-1447	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic dragkedja stl XS
2012-1448	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic dragkedja stl S
2012-1449	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic dragkedja stl M
2012-1450	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic dragkedja stl L
2012-1451	Fixeringsväst Stealth Classic Dynamic dragkedja stl XL

Bröstsele H-form

Ger mindre stöd för bålen, men mer frihet för skuldror och armar. Passar ofta aktiva användare.



	A	B	C
XS	7 cm	22 cm	4 cm
S	8 cm	31 cm	5 cm
M	10 cm	35 cm	6 cm
L	11 cm	41 cm	7 cm

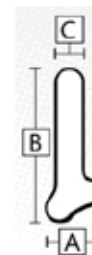


Art.nr	Artikelbenämning
2012-1465	Bröstsele Stealth H-form stl XS
2012-1466	Bröstsele Stealth H-form stl S
2012-1467	Bröstsele Stealth H-form stl M
2012-1468	Bröstsele Stealth H-form stl L

Bröstbälte dynamisk

Ger optimal rörelsefrihet för skuldror och bål, samtidigt som användaren ges ett jämnt stöd över bålen. Även lämplig vid rotation av bålen. Dynamiska egenskaper för god flexibilitet, stabilitet och komfort.



	A	B	C
XS	36 cm	7 cm	9 cm
S	41 cm	7 cm	10 cm
M	46 cm	8 cm	10 cm
L	53 cm	8 cm	11 cm
XL	58 cm	8 cm	12 cm

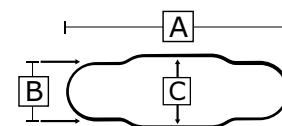


Art.nr	Artikelbenämning
2012-1360	Bröstbälte Stealth dynamisk stl XS 35cm
2012-1361	Bröstbälte Stealth dynamisk stl S 40cm
2012-1362	Bröstbälte Stealth dynamisk stl M 45cm
2012-1320	Bröstbälte Stealth dynamisk stl L 50cm

Bröstsele Y-form

Lämpligt vid asymmetri eller då användaren har nedsatt funktionalitet i en kroppshalva. Dynamiska egenskaper för god flexibilitet, stabilitet och komfort.



	A	B	C
S	48 cm	20 cm	5 cm
M	56 cm	23 cm	6 cm
L	64 cm	28 cm	6 cm

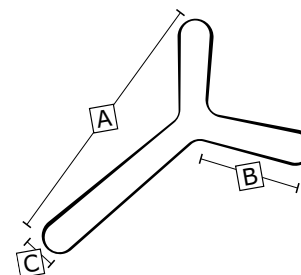

Art.nr	Artikelbenämning
2012-1452	Bröstsele Stealth Y-form stl S
2012-1453	Bröstsele Stealth Y-form stl M
2012-1454	Bröstsele Stealth Y-form stl L


Ankelfixering

Ett ankelstöd ger användare med ofrivilliga rörelser eller korsningstendens ett mer balanserat sittande och därmed ges förutsättning för ökad kontroll av både bål och huvud.



A

XS	22 cm
S	23 cm
M	25 cm
L	29 cm
XL	32 cm

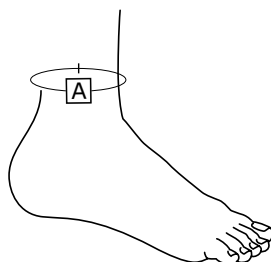

Art.nr	Artikelbenämning
2012-1455	Ankelfixering Stealth m spänne stl XS
2012-1456	Ankelfixering Stealth m spänne stl S
2012-1457	Ankelfixering Stealth m spänne stl M
2012-1458	Ankelfixering Stealth m spänne stl L
2012-1459	Ankelfixering Stealth m spänne stl XL



medemagruppen